


3

Observando Micro-organismos Através do Microscópio

Os micro-organismos são pequenos demais para serem vistos a olho nu, devendo ser observados através de um microscópio. O termo *microscópio* é derivado da palavra em latim *micro*, que significa pequeno, e da palavra em grego *skopos*, olhar. Os microbiologistas modernos utilizam microscópios que produzem, com grande clareza, ampliações que são milhares de vezes maiores do que as da lente única de van Leeuwenhoek (veja a Figura 1.2b na página 7). Este capítulo descreve como funcionam os diferentes tipos de microscópios e por que um tipo pode ser utilizado preferencialmente a outro.

Alguns micróbios são mais facilmente observáveis que outros, devido ao seu tamanho maior ou a características. Muitos micróbios, entretanto, devem ser submetidos a vários procedimentos de coloração antes que suas paredes celulares, cápsulas e outras estruturas percam seu estado natural incolor. A última parte deste capítulo explica alguns dos métodos mais comumente utilizados na preparação de amostras para exame através de um microscópio óptico.

Você deve estar se perguntando como iremos classificar, contar e medir as amostras que serão estudadas. Para responder a essa pergunta, este capítulo inicia com uma discussão sobre como utilizar o sistema métrico para medir os micróbios.

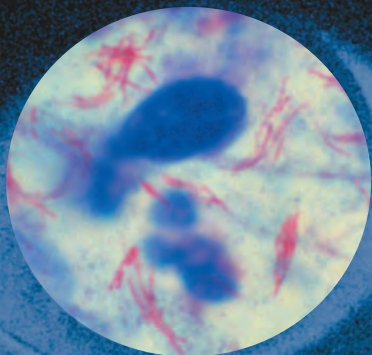

SOB O MICROSCÓPIO

Mycobacterium tuberculosis é o agente causador da tuberculose.

P&R

A coloração resistente a álcool-ácido do escarro de um paciente é um método rápido, confiável e barato para diagnosticar a tuberculose. Com qual cor as células bacterianas aparecem se o paciente tiver tuberculose?

Procure pela resposta neste capítulo.

Unidades de medida

OBJETIVO DO APRENDIZADO

- 3-1** Listar as unidades métricas utilizadas para medir os micro-organismos.

Como os micro-organismos e seus componentes são muito pequenos, eles são medidos em unidades que não são familiares para muitos de nós em nossa vida diária. Quando medimos os micro-organismos, utilizamos o sistema métrico. A unidade-padrão de comprimento no sistema métrico é o metro (m). Uma grande vantagem do sistema métrico é que as unidades estão relacionadas umas às outras por fatores de 10. Desse modo, 1 m equivale a 10 decímetros (dm) ou 100 centímetros (cm) ou 1.000 milímetros (mm). As unidades do sistema de medida dos Estados Unidos não possuem a vantagem da fácil conversão por um único fator de 10. Por exemplo, os norte-americanos utilizam 3 pés ou 36 polegadas que equivalem a 1 jarda.

Os micro-organismos e seus componentes estruturais são medidos em unidades ainda menores, como os micrômetros e os nanômetros. Um **micrômetro** (μm) é igual a 0,000001 m (10^{-6} m). O prefixo *micro* indica que a unidade seguinte deve ser dividida por 1 milhão, ou 10^6 (veja a seção sobre Notação Exponencial no Apêndice B). Um **nanômetro** (nm) é igual a 0,000000001 m (10^{-9} m). Angström (Å) era usado antigamente para representar 10^{-10} m, ou 0,1 nm.

A **Tabela 3.1** apresenta as unidades métricas básicas de comprimento e alguns de seus equivalentes do sistema norte-americano. Na Tabela 3.1, você pode comparar as unidades microscópicas de medida com as unidades macroscópicas comumente conhecidas, como centímetros, metros e quilômetros. Se você examinar a Figura 3.2 na página 58, verá os tamanhos relativos de vários organismos na escala métrica.

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Se um micróbio mede 10 μm de comprimento, o quanto isso é em nanômetros? **3-1**

Microscopia: os instrumentos

OBJETIVOS DO APRENDIZADO



- 3-2** Fazer um diagrama da trajetória da luz através de um microscópio composto.
- 3-3** Definir *ampliação total e resolução*.
- 3-4** Identificar um uso para as microscopias de campo escuro, de contraste de fase, de contraste por interferência diferencial, de fluorescência, confocal, de dois fótons e de varredura acústica, e compará-las com a iluminação de campo claro.
- 3-5** Explicar qual a diferença entre a microscopia eletrônica e a microscopia óptica.
- 3-6** Identificar um uso para os microscópios MET, MEV e o microscópio de varredura por sonda.

O microscópio simples utilizado por van Leeuwenhoek no século XVII possuía somente uma lente e era similar a uma lupa. Entretanto, van Leeuwenhoek foi o melhor polidor de lentes no mundo em sua época. Suas lentes eram polidas com tal precisão que uma única lente podia ampliar um micróbio em 300 vezes. Seus microscópios simples permitiram que ele fosse a primeira pessoa a ver as bactérias (veja a Figura 1.2, página 7).

Os contemporâneos de van Leeuwenhoek, como Robert Hooke, construíram microscópios compostos, que possuem múltiplas lentes. Na verdade, é creditada a um fabricante holandês de binóculos, Zaccharias Janssen, a produção do primeiro microscópio composto por volta de 1600. Entretanto, esses microscópios compostos iniciais eram de pouca qualidade e não podiam ser usados para se observar bactérias. Foi somente em 1830 que um microscópio significativamente melhor foi desenvolvido por Joseph Jackson Lister (o pai de Joseph Lister). Várias melhorias no microscópio de Lister resultaram no desenvolvimento do microscópio composto moderno, do tipo usado em laboratórios de microbiologia atualmente. Os estudos microscópicos de espécimes vivos revelaram interações dramáticas entre os micróbios (veja o quadro Aplicações da Microbiologia na página 57).

Tabela 3.1 Unidades métricas de comprimento e equivalentes dos Estados Unidos

Unidade métrica	Significado do prefixo	Equivalente métrico	Equivalente dos Estados Unidos
1 quilômetro (km)	<i>quilo</i> = 1.000	1.000 m = 10^3 m	3.280,84 pés ou 0,62 milhas; 1 milha = 1,61 km
1 metro (m)		Unidade-padrão de medida	39,37 polegadas ou 3,28 pés ou 1,09 jardas
1 decímetro (dm)	<i>deci</i> = 1/10	0,1 m = 10^{-1} m	3,94 polegadas
1 centímetro (cm)	<i>centi</i> = 1/100	0,01 m = 10^{-2} m	0,394 polegadas; 1 polegada = 2,54 cm
1 milímetro (mm)	<i>mili</i> = 1/1.000	0,001 m = 10^{-3} m	
1 micrômetro (μm)	<i>micro</i> = 1/1.000.000	0,000001 m = 10^{-6} m	
1 nanômetro (nm)	<i>nano</i> = 1/1.000.000.000	0,000000001 m = 10^{-9} m	
1 picômetro (pm)	<i>pico</i> = 1/1.000.000.000.000	0,000000000001 m = 10^{-12} m	

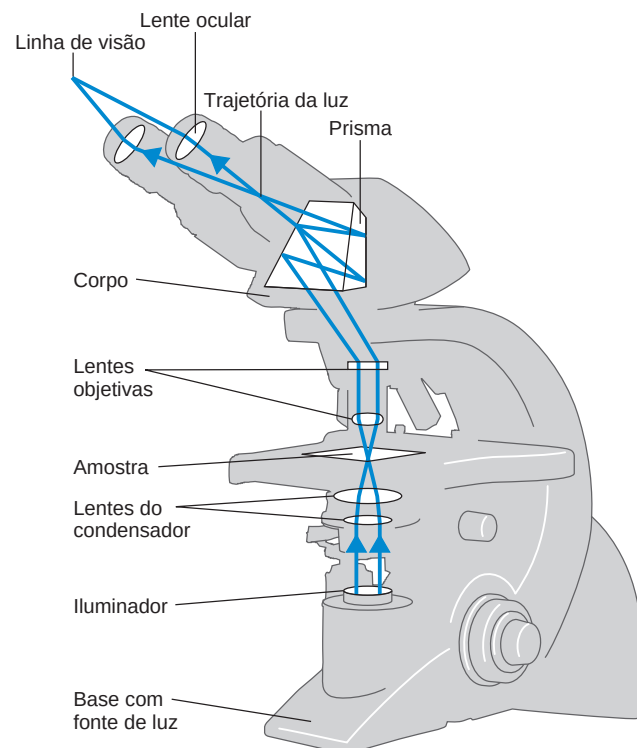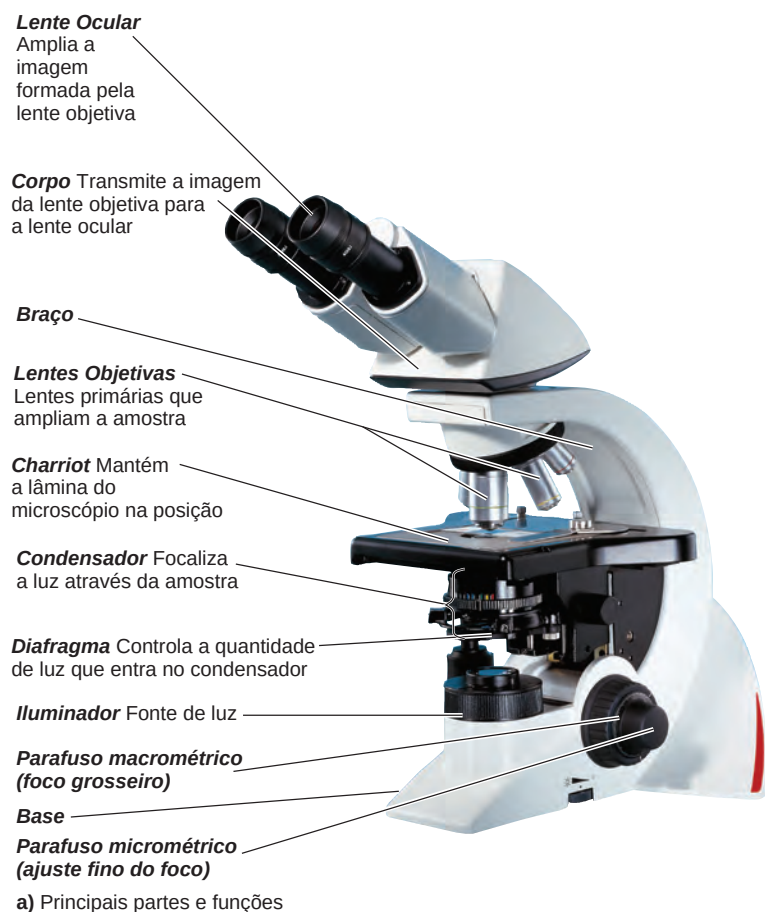

b) Trajetória da luz (de baixo para cima)

Figura 3.1 O microscópio óptico composto.

P Como é calculada a ampliação total de um microscópio óptico composto?

Microscopia óptica

Microscopia óptica refere-se ao uso de qualquer tipo de microscópio que utilize luz para observar amostras. Neste capítulo examinaremos vários tipos de microscopia óptica.

Microscopia óptica composta

Um **microscópio óptico composto (MO)** moderno possui uma série de lentes e utiliza a luz visível como fonte de iluminação (**Figura 3.1a**). Com um microscópio óptico composto, podemos examinar amostras muito pequenas, bem como parte de seus detalhes. Uma série de lentes finamente polidas (**Figura 3.1b**) forma uma imagem claramente focada, que é muitas vezes maior que a amostra em si. Essa ampliação é obtida quando os raios de luz de um **iluminador**, a fonte de luz, passam através de um **condensador**, que possui lentes que direcionam os raios de luz através da amostra. A seguir, os raios de luz passam para as **lentes objetivas**, as lentes mais próximas da amostra. A imagem da amostra é novamente ampliada pela **lente ocular**.

Podemos calcular a **ampliação total** de uma amostra multiplicando a ampliação (alcance) da lente objetiva pela ampliação (alcance) da lente ocular. A maior parte dos microscópios utilizados

em microbiologia possui várias lentes objetivas, incluindo 10× (baixo alcance), 40× (alto alcance) e 100× (imersão em óleo, que será descrita em breve). A maioria das lentes oculares amplia as amostras por um fator de 10. Multiplicando-se a ampliação de uma lente objetiva específica pela ampliação da lente ocular, veremos que a ampliação total seria de 100× para as lentes de baixo alcance, 400× para as de alto alcance e 1.000× para a imersão em óleo. Alguns microscópios ópticos compostos podem alcançar uma ampliação de 2.000× com as lentes de imersão em óleo.

A **resolução** (também chamada de *potência de resolução*) é a capacidade das lentes de diferenciar detalhes e estruturas. Especificamente, refere-se à capacidade das lentes de diferenciar entre dois pontos separados a uma determinada distância. Por exemplo, se um microscópio possui uma potência de resolução de 0,4 nm, pode distinguir entre dois pontos se eles estiverem separados por uma distância de pelo menos 0,4 nm. Um princípio geral da microscopia é que, quanto mais curto o comprimento de onda da luz utilizada no instrumento, maior a resolução. A luz branca utilizada em um microscópio óptico composto possui um comprimento de onda relativamente longo e não pode determinar estruturas menores que 0,2 µm. Esse fato e outras considerações práticas limitam a ampliação

O que é este limo?

Quando as bactérias crescem, frequentemente permanecem juntas em grupos chamados de biofilmes. Isso pode resultar no filme viscoso encontrado em rochas, alimentos, dentro de tubos e em dispositivos médicos implantados. As células bacterianas interagem e exibem organização multicelular (**Figura A**).

Pseudomonas aeruginosa pode crescer dentro de um ser humano sem causar doença até formar um biofilme que ataca o sistema imune do hospedeiro. As bactérias *P. aeruginosa* formadoras de biofilme colonizam os pulmões de pacientes com fibrose cística e são uma das principais causas de morte nesses pacientes (**Figura B**). Talvez os biofilmes que causam doenças possam ser prevenidos por novas drogas que destroem o indutor (discutido em breve).

Mixobactérias

As mixobactérias são encontradas em material orgânico em decomposição e água doce em todo o mundo. Embora sejam bactérias, muitas

Figura A *Paenibacillus*. À medida que uma pequena colônia se afasta da colônia parental, outros grupos de células seguem a primeira colônia. Logo, todas as outras bactérias juntam-se ao deslocamento para formar essa colônia espiralada.



nunca existem como células individuais. As células de *Myxococcus xanthus* parecem “caçar” em grupos. Em seu habitat aquoso natural, as células de *M. xanthus* formam colônias esféricas que cercam a “presa” (uma bactéria), onde podem secretar enzimas digestivas e absorver nutrientes. Em substratos sólidos, células de mixobactérias deslizam sobre uma superfície sólida, deixando rastros de muco que são seguidos por outras células. Quando a comida está escassa, as células se agregam para formar uma massa. As células no interior da massa se diferenciam em corpos de frutificação que consistem em pedúnculos mucosos e arranjos de esporos, como mostrado na **Figura C**.

Vibrio

Vibrio fischeri é uma bactéria bioluminescente que vive como um simbiote no órgão produtor de luz da lula e de certos peixes. Quando em vida livre, as bactérias encontram-se em baixa concentração e não emitem luz. Entretanto, quando crescem em seus hospedeiros, são encontradas em altas concentrações, e cada célula é induzida a produzir a enzima luciferase, usada na via química da bioluminescência.

Como funciona o comportamento de grupos bacterianos

A densidade celular altera a expressão de genes nas células bacterianas em um processo denominado *quorum sensing* (sensor de quorum). Na lei, um quorum representa o número mínimo de membros necessários para conduzir as negociações. O *quorum sensing* é a capacidade das bactérias de se comunicarem e coordenarem o comportamento. As bactérias que utilizam o *quorum sensing* produzem e secretam uma sinalização química denominada *indutor*. À medida que o indutor se difunde



Figura B Biofilme de *Pseudomonas aeruginosa*.

para o meio circundante, outras células bacterianas movimentam-se em direção à fonte e começam a produzir o indutor. A concentração do indutor aumenta de acordo com o aumento do número de células, que, por sua vez, atraem mais células e iniciam a síntese de mais indutor.

Figura C Um corpo de frutificação de uma mixobactéria.


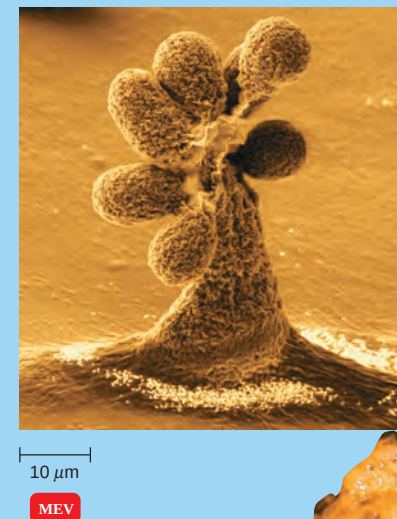


Figura 3.2

FIGURA FUNDAMENTAL Tamanhos e resoluções

Esta figura ilustra dois conceitos: 1) os tamanhos relativos de várias amostras, e 2) a resolução do olho humano e de diversos microscópios. As micrografias incluídas em todo o livro (como as apresentadas a seguir) apresentarão escalas de referência e símbolos para ajudá-lo a identificar o tamanho real da amostra e o tipo de microscópio utilizado na imagem. Um símbolo vermelho indica que a micrografia foi colorida artificialmente. Veja a Tabela 3.2 nas páginas 66 a 68 para mais explicações.

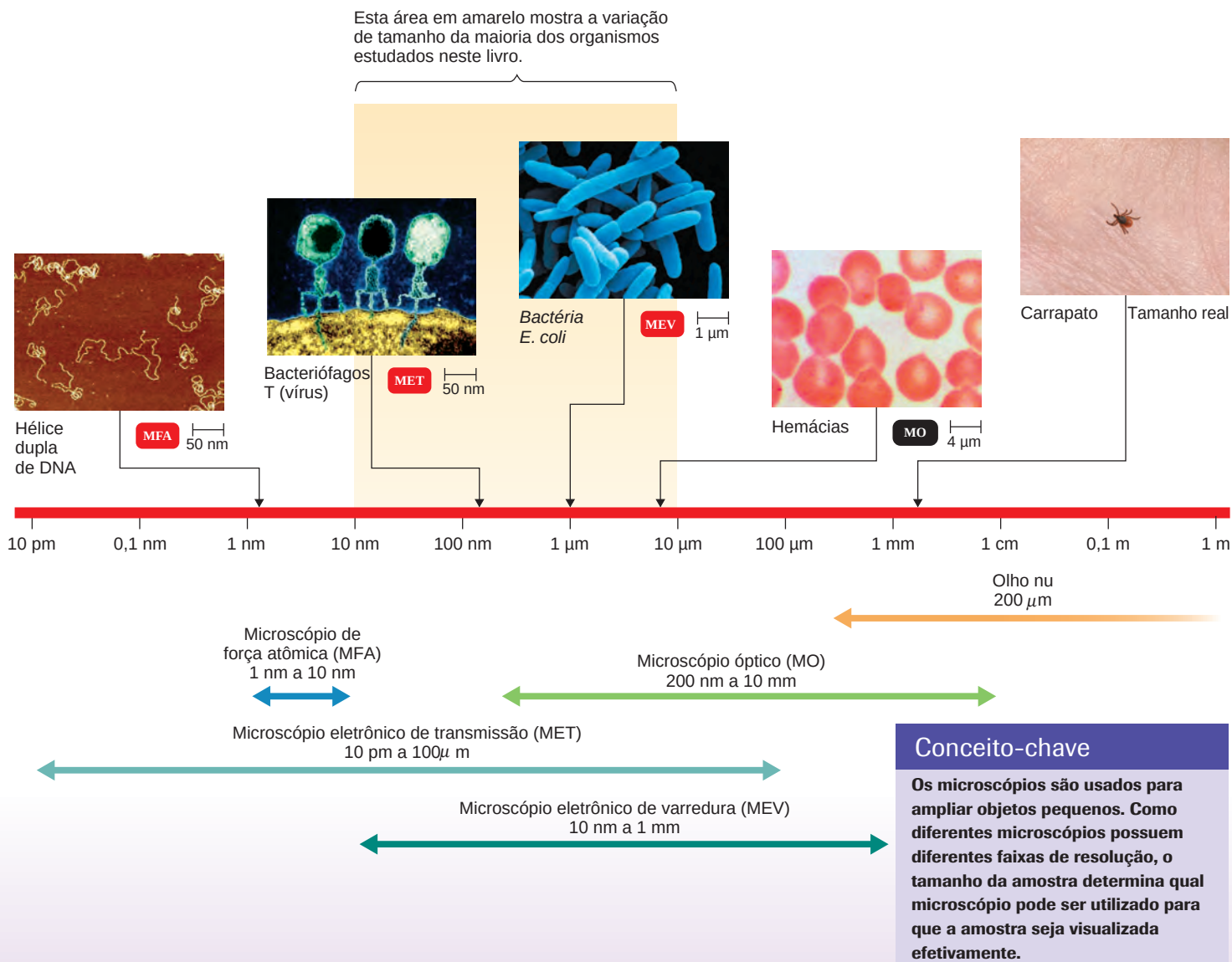

ção obtida até mesmo pelo melhor microscópio óptico composto a cerca de 2.000×. Comparando, os microscópios de van Leeuwenhoek possuíam uma resolução de 1 µm.

A **Figura 3.2** apresenta várias amostras que podem ser visualizadas pelo olho humano, pelo microscópio óptico e pelo microscópio eletrônico.

Para se obter uma imagem clara e finalmente detalhada em um microscópio óptico composto, as amostras devem ser preparadas para contrastarem nitidamente com o seu *meio* (substância na qual elas estão suspensas). Para atingir esse contraste, devemos alterar o índice de refração das amostras em relação ao índice de seu meio. O **índice de refração** é a medida da capacidade

de curvatura da luz em um meio. Alteramos o índice de refração das amostras por coloração, um procedimento que discutiremos em breve. Os raios de luz se movem em uma linha reta através de um meio único. Após a coloração, quando os raios de luz passam através dos dois materiais (a amostra e seu meio) com diferentes índices de refração, os raios mudam de direção (sofrem refração) a partir de uma linha reta, se curvando ou mudando o ângulo no limite entre os materiais, aumentando o contraste da imagem entre a amostra e o meio. À medida que os raios de luz seguem para longe das amostras, eles se espalham e entram na lente objetiva, e a imagem é assim ampliada.

Para alcançar uma alta ampliação ($1.000\times$) com boa resolução, a lente objetiva deve ser pequena. Embora necessitemos que a luz percorra a amostra e o meio para ser refratada de modo diferente, não desejamos perder os raios de luz após a sua passagem através da amostra corada. Para preservar a direção dos raios de luz na maior ampliação, óleo de imersão é colocado entre a lâmina de vidro e a lente objetiva de imersão (**Figura 3.3**). O óleo de imersão possui o mesmo índice de refração que o vidro, e dessa forma torna-se parte da óptica do vidro do microscópio. A menos que o óleo de imersão seja utilizado, os raios de luz são refratados à medida que penetram no ar sobre a lâmina, e a lente objetiva precisaria ter um diâmetro maior para capturar a maior parte deles. O óleo possui o mesmo efeito que o aumento do diâmetro da lente objetiva; portanto, ele melhora a potência de resolução das lentes. Se o óleo não for usado com uma lente objetiva de imersão, a imagem torna-se borrada, com baixa resolução.

Sob condições normais de funcionamento, o campo de visão em um microscópio óptico composto é claramente iluminado. Ao focalizar a luz, o condensador produz uma **iluminação de campo claro** (**Figura 3.4a**).

Nem sempre é desejável corar uma amostra. Entretanto, uma célula não corada possui pouco contraste em relação a o que a cerca, sendo assim difícil de ser visualizada. Células não coradas são mais facilmente observadas com os microscópios compostos modificados descritos na próxima seção.

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Através de quais lentes a luz passa em um microscópio composto? **3-2**
- ✓ O que significa quando o microscópio possui uma resolução de $0,2\text{ nm}$? **3-3**

Microscopia de campo escuro

Um **microscópio de campo escuro** é utilizado para examinar micro-organismos vivos que são invisíveis ao microscópio óptico comum, que não podem ser corados por métodos-padrão ou que são tão distorcidos pela coloração que suas características não podem ser identificadas. Em vez do condensador normal, um microscópio de campo escuro utiliza um condensador de campo escuro, que contém um disco opaco. O disco bloqueia a luz que poderia entrar na lente objetiva diretamente. Somente a luz que é refletida para fora (devolvida) da amostra entra na lente objetiva. Uma vez que não há luz de fundo direta, a amostra aparece iluminada contra um fundo preto – o campo escuro (**Figura 3.4b**). Essa técnica é frequen-

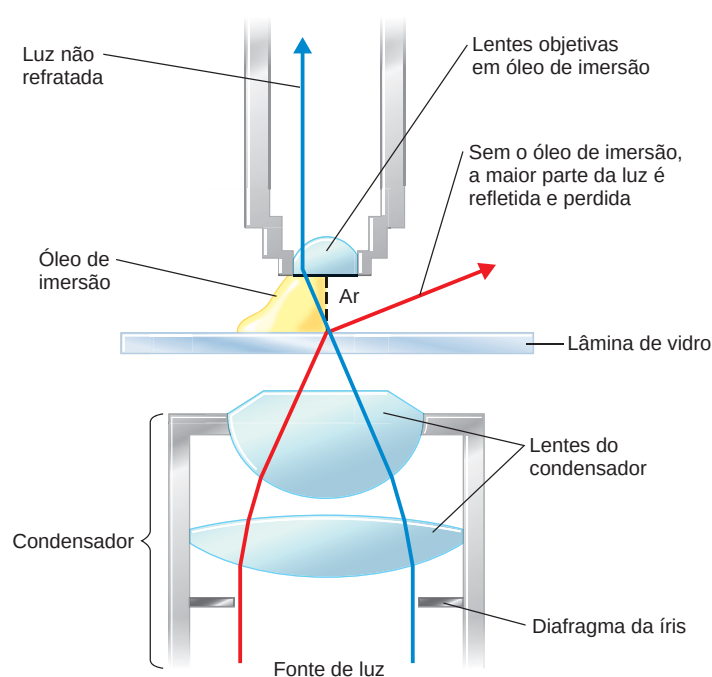


Figura 3.3 Refração no microscópio composto, utilizando uma lente objetiva em óleo de imersão. Como os índices de refração da lâmina de vidro e do óleo de imersão são os mesmos, os raios de luz não são refratados quando passam de um meio para o outro, quando uma lente objetiva em óleo de imersão é usada. Este método produz imagens com melhor resolução em ampliações maiores que $900\times$.


P O que significa resolução?

temente utilizada para examinar micro-organismos não corados suspensos em líquido. Uma utilização da microscopia de campo escuro é o exame de espiroquetas muito finas, como o *Treponema pallidum*, o agente causador da sífilis.

Microscopia de contraste de fase

Outro modo de se observar micro-organismos é com um **microscópio de contraste de fase**. A microscopia de contraste de fase é especialmente útil, pois permite um exame detalhado das estruturas internas de micro-organismos vivos. Além disso, não é necessária a fixação (fixar os micróbios à lâmina do microscópio) ou a coloração da amostra – procedimentos que poderiam distorcer ou matar os micro-organismos.

O princípio da microscopia de contraste de fase baseia-se na natureza das ondas dos raios de luz e no fato de que os raios luminosos podem estar *em fase* (seus picos e vales combinam) ou *fora de fase*. Se o pico de onda dos raios luminosos de uma fonte coincide com o pico de onda da outra fonte, os raios interagem para produzir *reforço* (brilho relativo). Entretanto, se o pico de onda de uma fonte luminosa coincide com a parte inferior da onda de outra fonte de luz, os raios interagem para produzir *interferência* (escuridão relativa). Em um microscópio de contraste de fase, um conjunto de raios luminosos sai diretamente da fonte

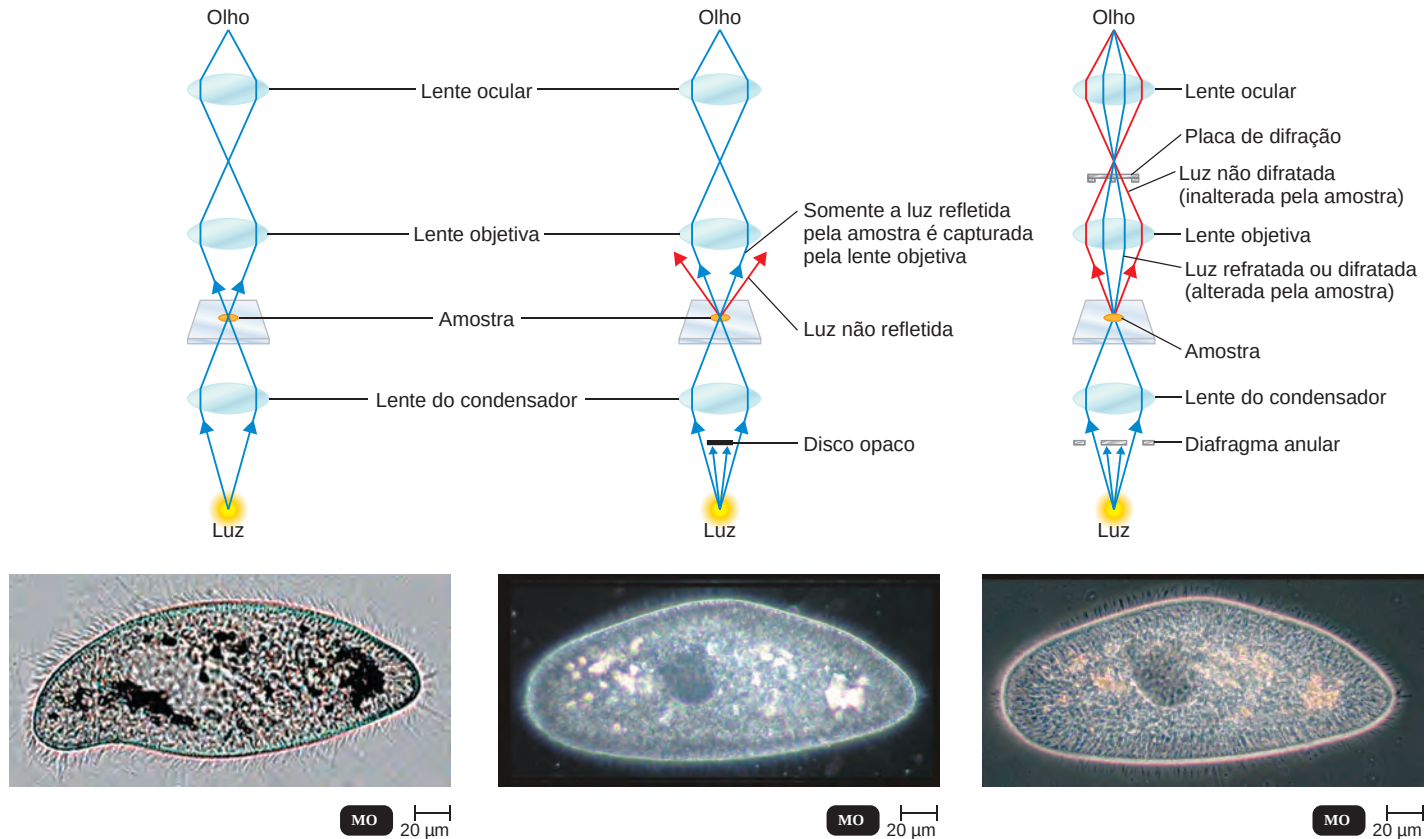

a) Campo claro (No alto) A trajetória da luz na microscopia de campo claro e o tipo de iluminação produzida pelos microscópios ópticos compostos comuns. (Acima) A iluminação de campo claro mostra as estruturas internas e o contorno da película transparente (revestimento externo).

b) Campo escuro (No alto) O microscópio de campo escuro utiliza um condensador especial com um disco opaco que elimina toda a luz no centro do feixe. A única luz que atinge a amostra vem em ângulo; assim, somente a luz refletida pela amostra (raios azuis) alcança a lente objetiva. (Acima) Contra o fundo preto visto na microscopia de campo escuro, as bordas da célula estão brilhantes, algumas estruturas internas parecem brilhar e a película é quase visível.

c) Contraste de fase (No alto) Na microscopia de contraste de fase, a amostra é iluminada pela luz que passa através de um diafragma anular (em forma de anel). Os raios de luz diretos (inalterados pela amostra) percorrem uma trajetória diferente dos raios luminosos que são refletidos ou difratados à medida que passam através da amostra. Esses dois conjuntos de raios são combinados no olho. A luz refletida ou difratada é indicada em azul; os raios diretos estão em vermelho. (Acima) A microscopia de contraste de fase mostra uma diferenciação maior das estruturas internas e também mostra claramente a película.

Figura 3.4 Microscopia de campo claro, campo escuro e contraste de fase. As ilustrações mostram as diferentes trajetórias de luz de cada um desses tipos de microscopia. As fotografias comparam o mesmo espécime de *Paramecium* utilizando essas três diferentes técnicas de microscopia.

P Quais são as vantagens da microscopia de campo claro, campo escuro e contraste de fase?

de luz. O outro conjunto é derivado da luz que é refletida ou difratada de uma estrutura particular na amostra. (*Difração* é a dispersão dos raios luminosos quando eles “tocam” a borda de uma amostra. Os raios difratados são curvados para longe dos raios de luz paralelos que passam mais distante da amostra.) Quando os dois conjuntos de raios de luz – diretos e refletidos ou refratados – são reunidos, formam uma imagem da amostra na lente ocular, contendo áreas que são relativamente claras (em fase) e vários tons de cinza até a cor preta (fora de fase; **Figura 3.4c**). Na microscopia de contraste de fase, as estruturas internas de uma célula tornam-se mais bem definidas.

Microscopia de contraste com interferência diferencial

A **microscopia de contraste com interferência diferencial (CID)** é similar à microscopia de contraste de fase, pois utiliza as diferenças nos índices de refração. Entretanto, um microscópio CID utiliza dois feixes de luz em vez de um. Além disso, prismas separam cada feixe de luz, adicionando cores contrastantes à amostra. Assim, a resolução de um microscópio CID é maior que a de um microscópio de contraste de fase padrão. A imagem também apresenta cores brilhantes e parece quase tridimensional (**Figura 3.5**).



Figura 3.5 Microscopia de contraste com interferência diferencial (CID). Assim como no contraste de fase, a CID utiliza as diferenças nos índices de refração para produzir uma imagem, neste caso o protozoário *Paramecium*. As cores na imagem são produzidas por prismas que dividem os dois feixes de luz usados neste processo.


P Por que a resolução de um microscópio CID é maior que a de um microscópio de contraste de fase?

Microscopia de fluorescência


A **microscopia de fluorescência** vale-se da **fluorescência**, a capacidade das substâncias de absorver curtos comprimentos de ondas de luz (ultravioleta) e produzir luz em um comprimento de onda maior (visível). Alguns organismos fluorescem naturalmente sob iluminação ultravioleta; se a amostra que será visualizada não fluorescer naturalmente, ela pode ser corada com um grupo de corantes fluorescentes denominados **fluorocromos**. Quando os micro-organismos corados com um fluorocromo são examinados sob um microscópio de fluorescência, com uma fonte de luz ultravioleta ou próxima da ultravioleta, eles parecem luminosos, objetos brilhantes contra um fundo escuro.

Os fluorocromos possuem atrações especiais por diferentes micro-organismos. Por exemplo, o fluorocromo auramina O, que apresenta um brilho amarelo quando exposto à luz ultravioleta, é fortemente absorvido pelo *Mycobacterium tuberculosis*, a bactéria que causa a tuberculose. Quando o corante é aplicado a uma amostra de material com suspeita de conter a bactéria, esta pode ser detectada pelo surgimento de organismos amarelo-brilhantes contra um fundo escuro. O *Bacillus anthracis*, o agente causador do antraz, adquire cor verde-maçã quando corado com outro fluorocromo, o isotiocianato de fluoresceína (FITC).

O principal uso da microscopia de fluorescência é uma técnica diagnóstica denominada **técnica de anticorpo fluorescente (AF)** ou **imunofluorescência**. Os **anticorpos** são moléculas de defesa natural que são produzidas pelos seres humanos e muitos animais em reação a uma substância estranha, ou **antígeno**. Os anticorpos fluorescentes para um antígeno específico são obtidos da seguinte forma: um animal é injetado com um antígeno específico, como uma bactéria; o animal então começa a produzir anticorpos contra aquele antígeno. Após um período suficiente, os anticorpos são removidos do soro do animal. A seguir, como mostrado na **Figura 3.6a**, um fluorocromo é quimicamente combinado com os anticorpos. Esses anticorpos fluorescentes são então adicionados a uma

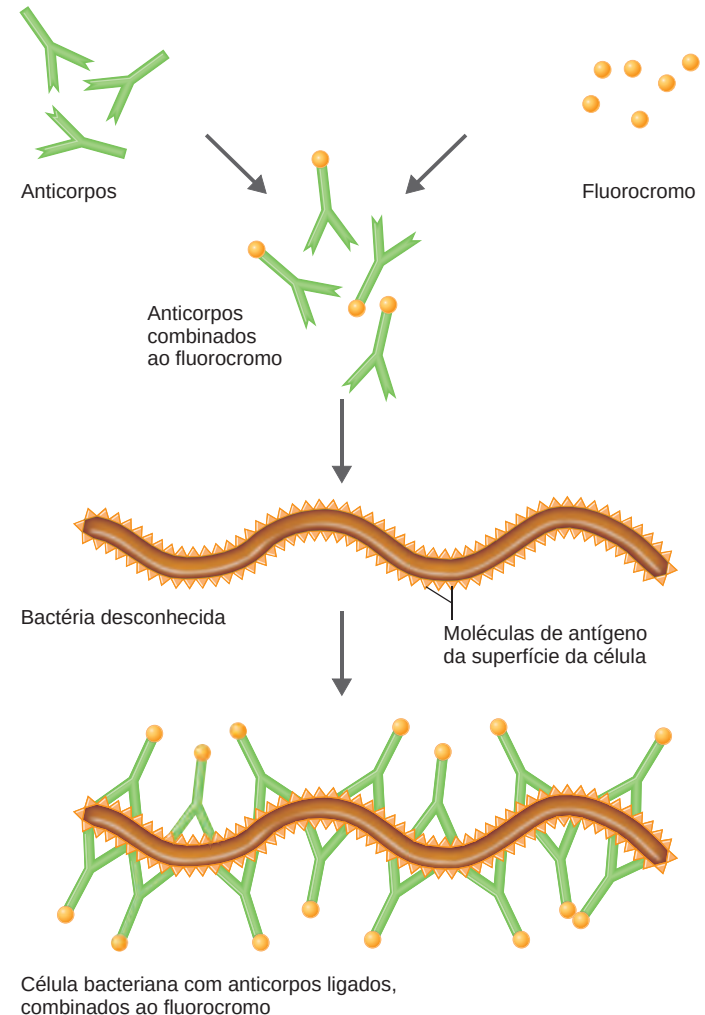

(a)

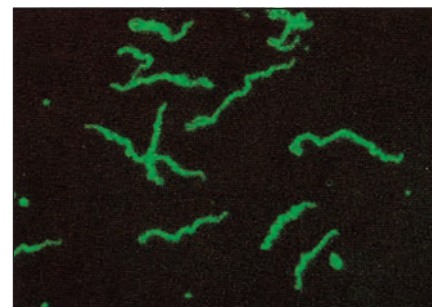

(b)

Figura 3.6 O princípio da imunofluorescência. (a) Um tipo de fluorocromo é combinado a anticorpos contra um tipo específico de bactéria. Quando a preparação é adicionada às células bacterianas em uma lâmina, os anticorpos se fixam às células bacterianas, e as células fluorescem quando iluminadas com luz ultravioleta. (b) No teste de absorção de anticorpo treponêmico fluorescente (FTA-ABS) para a sífilis mostrado aqui, o *Treponema pallidum* é evidenciado como células verdes contra um fundo escuro.

P Por que as outras bactérias não fluorescem no teste FTA-ABS?



Figura 3.7 Microscopia confocal. A microscopia confocal produz imagens tridimensionais e pode ser usada para examinar o interior de células. Nesta figura são mostrados vacúolos contráteis no *Paramecium multimicronucleatum*.

P Que característica da microscopia confocal elimina o desfoque que ocorre com outros microscópios?

lâmina de microscópio contendo uma bactéria desconhecida. Se essa bactéria desconhecida for a mesma bactéria que foi injetada no animal, os anticorpos fluorescentes se ligarão aos antígenos na superfície da bactéria, fazendo com que ela fluoresça.

Essa técnica pode detectar bactérias e outros micro-organismos patogênicos, mesmo dentro de células, tecidos ou outras amostras clínicas (Figura 3.6b). Além disso, pode ser utilizada para identificar um micróbio em minutos. A imunofluorescência é especialmente útil no diagnóstico da sífilis e da raiva. Discutiremos mais sobre as reações antígeno-anticorpo e sobre imunofluorescência no Capítulo 18.

Microscopia confocal

Microscopia confocal é uma técnica na microscopia óptica utilizada para reconstruir imagens tridimensionais. Assim como na microscopia de fluorescência, as amostras são coradas com fluorocromos para que emitam, ou devolvam, a luz. Contudo, em vez da iluminação do campo todo, na microscopia confocal um plano de uma pequena região da amostra é iluminado com uma luz de pequeno comprimento de onda (azul), que passa a luz devolvida através de uma abertura alinhada com a região iluminada. Cada plano corresponde a uma imagem de um corte fino que foi fisicamente seccionado a partir de uma amostra. Os planos e as regiões sucessivos são iluminados até que toda a amostra tenha sido examinada. Uma vez que a microscopia confocal utiliza um orifício pequeno de abertura (*pinhole*), elimina o desfoque que ocorre com outros microscópios. Como resultado, imagens bidimensionais excepcionalmente claras podem ser obtidas, com uma resolução até 40% melhor que a dos outros microscópios.

A maioria dos microscópios confocais é utilizada em conjunto com computadores para construir imagens tridimensionais. Os planos examinados de uma amostra, que lembram um arquivo de imagens, são convertidos a um formato digital que pode ser utilizado por um computador para construir uma representação tridimensional. As imagens reconstruídas podem ser movidas e visualizadas em qualquer orientação. Essa técnica tem sido usada para obter imagens tridimensionais de células inteiras e de componentes celulares (Figura 3.7). Além disso, a microscopia confocal pode ser utilizada para avaliar a fisiologia celular, monitorando as distribuições e as concentrações de substâncias como o ATP e os íons cálcio.

Microscopia de dois fótons

Da mesma maneira que na microscopia confocal, na **microscopia de dois fótons (MDF)** as amostras são coradas com um fluorocromo. A microscopia de dois fótons utiliza uma luz de comprimento de onda longo (vermelha), e dessa forma dois fótons, em vez de um, são necessários para excitar o fluorocromo para emitir luz. O comprimento de onda mais longo permite a imagem de células vivas em tecidos de até 1 mm de espessura (Figura 3.8). A microscopia confocal pode formar imagens de células em detalhes somente a uma espessura menor que 100 µm. Além disso, o comprimento de onda mais longo tem menor probabilidade de formar o oxigênio singlet, que danifica as células (veja a página 161). Outra vantagem da MDF é que ela pode rastrear a atividade das células em tempo real. Por exemplo, células do sistema imune foram observadas respondendo a um antígeno.

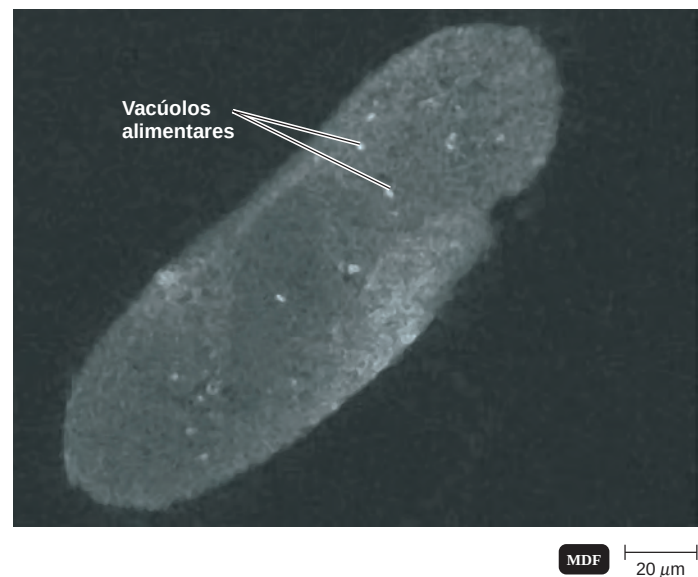


Figura 3.8 Microscopia de dois fótons (MDF). Esse procedimento torna possível a obtenção de imagens de células vivas de até 1 mm de espessura em detalhes. Esta imagem mostra o movimento dos vacúolos alimentares em um *Paramecium* vivo.

P Quais são as vantagens da MDF?

Microscopia acústica de varredura

A **microscopia acústica de varredura (MAV)** basicamente consiste em interpretar a ação de uma onda sonora enviada através de uma amostra. Uma onda sonora de uma frequência específica propaga-se através da amostra, e uma parte dessa onda é refletida de volta toda vez que atinge uma interface dentro do material. A resolução é de cerca de 1 μm . A MAV é usada para estudar células vivas aderidas a outra superfície, como células cancerígenas, placas ateroscleróticas e biofilmes bacterianos que obstruem equipamentos (Figura 3.9).

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Em que as microscopias de campo claro, campo escuro, contraste de fase e fluorescência são similares? 3-4

Microscopia eletrônica

Objetos menores que 0,2 μm , como vírus ou estruturas internas das células, devem ser examinados com um **microscópio eletrônico**. Na microscopia eletrônica, um feixe de elétrons é usado ao invés da luz. Como a luz, os elétrons livres se deslocam em ondas. A potência de resolução do microscópio eletrônico é muito maior que a dos outros microscópios descritos até agora. A melhor resolução dos microscópios eletrônicos é devida aos comprimentos de onda mais curtos dos elétrons; os comprimentos de onda dos elétrons são cerca de 100 mil vezes menores que os comprimentos de onda da luz visível. Portanto, os microscópios eletrônicos são usados para examinar estruturas muito pequenas para serem determinadas com microscópios ópticos. As imagens produzidas por microscópios eletrônicos são sempre em preto e branco, mas podem ser coloridas artificialmente para acentuar certos detalhes.

Ao invés de usar lentes de vidro, um microscópio eletrônico utiliza lentes eletromagnéticas para focalizar um feixe de elétrons na amostra. Existem dois tipos de microscópios eletrônicos: o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura.

Microscopia eletrônica de transmissão

No **microscópio eletrônico de transmissão (MET)**, um feixe de elétrons finamente focalizado de um canhão de elétrons passa através de um corte ultrafino da amostra, especialmente preparado (Figura 3.10a). O feixe é focalizado em uma pequena área da amostra por uma lente de condensador eletromagnética, que realiza uma função aproximadamente igual à do condensador de um microscópio óptico – direcionar o feixe de elétrons em uma linha reta para iluminar a amostra.

Os microscópios eletrônicos utilizam lentes eletromagnéticas para controlar a iluminação, o foco e a ampliação. Ao invés de ser colocada em uma lâmina de vidro, como nos microscópios ópticos, a amostra normalmente é colocada sobre uma tela de cobre. O feixe de elétrons passa através da amostra e então através de uma lente objetiva eletromagnética, que amplia a imagem. Finalmente, os elétrons são focalizados por uma lente projetora eletromagnética (em vez de uma lente ocular como no microscópio óptico) sobre uma tela fluorescente ou placa fotográfica. A imagem final, denominada

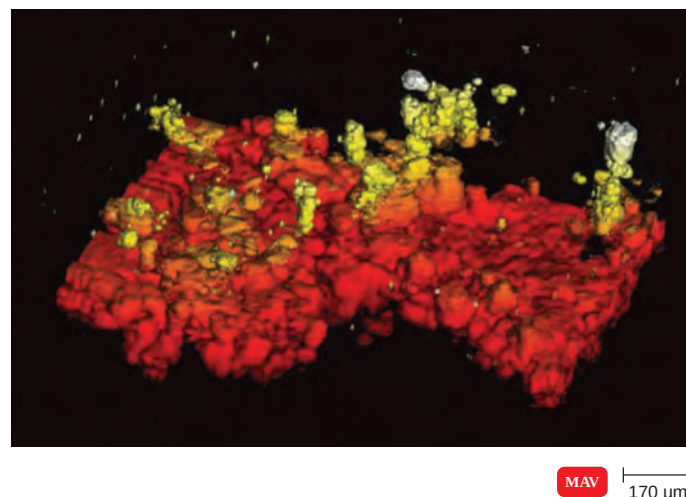


Figura 3.9 Microscopia acústica de varredura (MAV) de um biofilme bacteriano em uma lâmina. A microscopia acústica de varredura consiste essencialmente na interpretação da ação de ondas sonoras através da amostra.

P Qual o principal uso da MAV?

micrografia eletrônica de transmissão, aparece como muitas áreas iluminadas e escuras, dependendo do número de elétrons absorvidos pelas diferentes áreas da amostra.

Na prática, o microscópio eletrônico de transmissão pode determinar objetos tão próximos quanto 2,5 nm, e os objetos geralmente são ampliados de 10.000 a 100.000 $\times$. Como a maioria das amostras microscópicas é muito fina, o contraste entre as suas ultraestruturas e o fundo é fraco. O contraste pode ser amplamente aumentado utilizando-se um “corante” que absorve os elétrons e produz uma imagem mais escura na região corada. Sais de vários metais pesados, como o chumbo, o ósmio, o tungstênio e o urânio, são comumente usados como corantes. Esses materiais podem ser fixados na amostra (*coloração positiva*) ou usados para aumentar a opacidade eletrônica do campo circundante (*coloração negativa*). A coloração negativa é útil para o estudo de amostras muito pequenas, como as partículas virais, os flagelos bacterianos e as moléculas de proteína.

Além da coloração positiva e negativa, um micróbio pode ser visualizado por uma técnica denominada *projeção de sombras*. Nesse procedimento, um metal pesado, como a platina ou o ouro, é pulverizado em um ângulo de 45°, para que atinja o micróbio somente por um lado. O metal se acumula de um lado da amostra, e a área não atingida no lado oposto da amostra deixa uma área clara atrás dela, como uma sombra. Isso dá um efeito tridimensional à amostra e fornece uma ideia geral do tamanho e da forma da mesma (veja MET na Figura 4.6, página 80).

A microscopia eletrônica de transmissão tem alta resolução e é extremamente valiosa para o exame de diferentes camadas das amostras. Contudo, ela possui algumas desvantagens. Como os elétrons possuem uma potência limitada de penetração, somente um corte muito delgado de uma amostra (cerca de 100 nm) pode

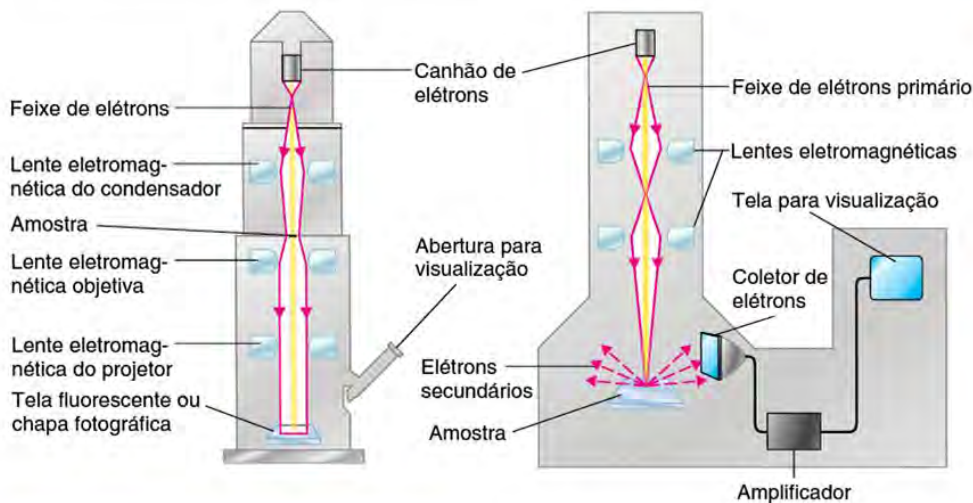


Figura 3.10 Microscopia eletrônica de transmissão e de varredura. As ilustrações mostram as trajetórias dos feixes de elétrons usados para criar imagens das amostras. As fotografias mostram um *Paramecium* visto com ambos os tipos de microscópios eletrônicos. Embora as micrografias eletrônicas normalmente sejam pretas e brancas, neste livro essas e outras micrografias eletrônicas foram coloridas artificialmente para dar ênfase.

P Em que diferem as imagens de MET e MEV do mesmo organismo?



(a) Transmissão. (No alto) Em um microscópio eletrônico de transmissão, os elétrons passam através da amostra e são dispersos. As lentes magnéticas focalizam a imagem em uma tela fluorescente ou placa fotográfica. (Acima) Esta micrografia eletrônica de transmissão (MET) colorida mostra um corte delgado de um *Paramecium*. Nesse tipo de microscopia, as estruturas internas presentes no corte podem ser observadas.



(b) Varredura. (No alto) Em um microscópio eletrônico de varredura, os elétrons primários varrem a amostra e arrancam elétrons de sua superfície. Esses elétrons secundários são captados por um coletor, amplificados e transmitidos a uma tela de visualização ou chapa fotográfica. (Acima) Nesta micrografia eletrônica de varredura (MEV) colorida, as estruturas da superfície de um *Paramecium* podem ser observadas. Note o aspecto tridimensional desta célula, em contraste com o aspecto bidimensional da micrografia eletrônica de transmissão na parte (a).

ser efetivamente estudado. Desse modo, a amostra não tem aspecto tridimensional. Além disso, as amostras devem ser fixadas, desidratadas e visualizadas em alto vácuo para prevenir a dispersão dos elétrons. Esses tratamentos não somente matam a amostra como também causam encolhimento e distorção, algumas vezes de tal forma que pode parecer que há estruturas adicionais em uma célula preparada. As estruturas que surgem como resultado do método de preparação são denominadas *artefatos*.

Microscopia eletrônica de varredura

O **microscópio eletrônico de varredura (MEV)** supera o problema do corte associado ao microscópio eletrônico de transmissão. Um microscópio eletrônico de varredura fornece imagens tridimensionais impressionantes das amostras (**Figura 3.10b**). Na microscopia eletrônica de varredura, um canhão de elétrons produz um feixe de elétrons finamente focalizado, denominado

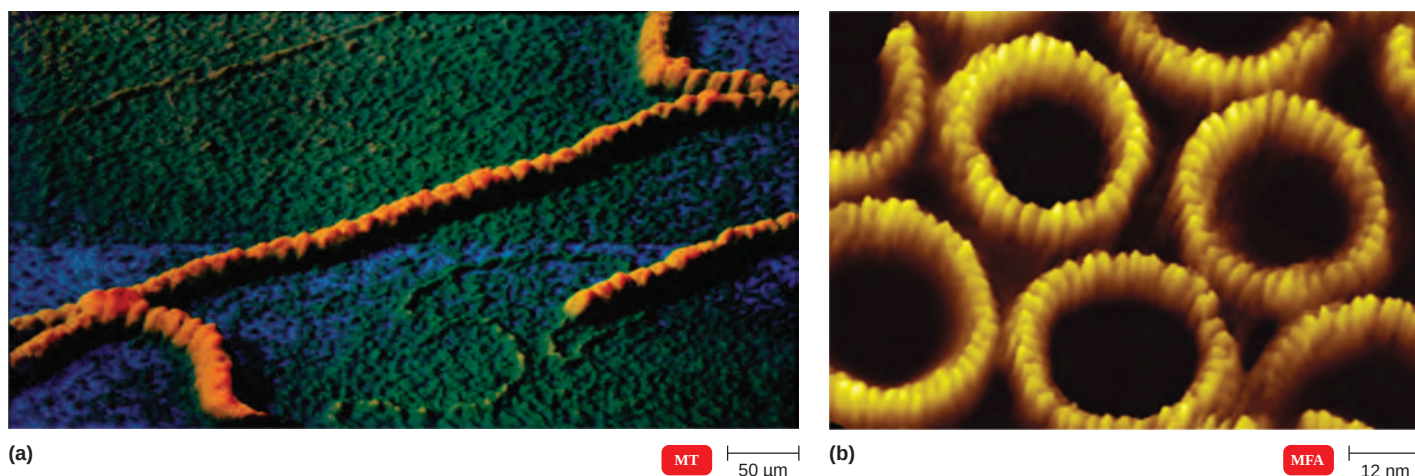


Figura 3.11 Microscopia de varredura por sonda. (a) Imagem da microscopia de tunelamento (MT) da proteína RecA de *E. coli*. Essa proteína está envolvida no reparo do DNA. (b) Imagem da microscopia de força atômica (MFA) da toxina perfringoglicina O de *Clostridium perfringens*. Essa toxina promove a formação de buracos em membranas plasmáticas.

P Qual é o princípio empregado na microscopia de varredura por sonda?

feixe eletrônico primário. Esses elétrons passam através de lentes eletromagnéticas e são dirigidos à superfície da amostra. O feixe primário de elétrons arranca elétrons da superfície da amostra, e os elétrons secundários produzidos são transmitidos a um coletor de elétrons, amplificados e usados para produzir uma imagem em uma tela ou chapa fotográfica. Essa imagem é chamada de *micrografia eletrônica de varredura*. Esse microscópio é especialmente útil no estudo das estruturas de superfície de células intactas e vírus. Na prática, ele pode determinar objetos tão próximos quanto 10 nm, e os objetos geralmente são ampliados de 1.000 a 10.000 $\times$.

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Por que os microscópios eletrônicos têm uma resolução melhor do que os microscópios ópticos? **3-5**

Microscopia de varredura por sonda

Desde o início da década de 1980, vários novos tipos de microscópios, denominados **microscópios de varredura por sonda**, têm sido desenvolvidos. Eles utilizam vários tipos de sondas para examinar em escala muito próxima a superfície de uma amostra sem modificá-la ou expô-la à radiação de alta energia. Esses microscópios podem ser usados para mapear formas atômicas e moleculares, caracterizar propriedades magnéticas e químicas e determinar as variações de temperatura no interior das células. Dentre os novos microscópios de varredura por sonda estão o microscópio de tunelamento e o microscópio de força atômica, discutidos a seguir.

Microscopia de tunelamento

A **microscopia de tunelamento (MT)** utiliza uma fina sonda metálica (tungstênio) que varre a amostra e produz uma imagem que revela protuberâncias e depressões dos átomos na superfície da amostra (**Figura 3.11a**). A potência de resolução de uma MT é muito maior que a de um microscópio eletrônico, podendo determinar detalhes que são apenas 1/100 do tamanho de um átomo. Além disso, não é necessária uma preparação especial da amostra para a observação. As MTs são usadas para fornecer imagens incrivelmente detalhadas de moléculas como o DNA.

Microscopia de força atômica

Na **microscopia de força atômica (MFA)**, uma sonda de metal e diamante é levemente pressionada sobre a superfície de uma amostra. À medida que a sonda se move ao longo da superfície da amostra, seus movimentos são registrados, e uma imagem tridimensional é produzida (**Figura 3.11b**). Assim como na MT, a MFA não requer uma preparação especial da amostra. A MFA é usada para fornecer imagens tanto de substâncias biológicas (em detalhes a nível quase atômico) (veja também a Figura 17.3b na página 480) quanto de processos moleculares (como a montagem da fibrina, um componente do coágulo sanguíneo).

Os vários tipos de microscopia descritos anteriormente estão resumidos na **Tabela 3.2** (páginas 66 a 68).

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Para que a microscopia eletrônica de transmissão é usada? E a microscopia de varredura por sonda? **3-6**

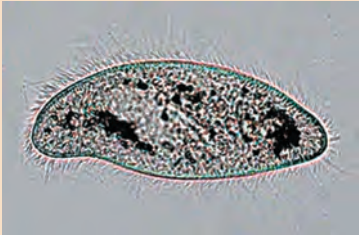
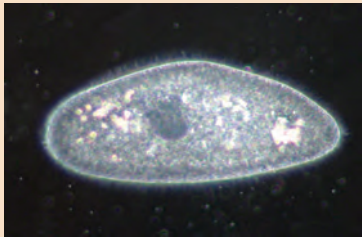
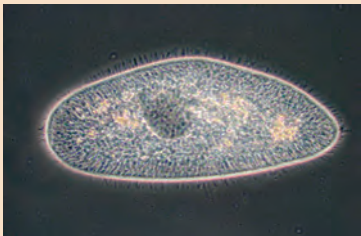
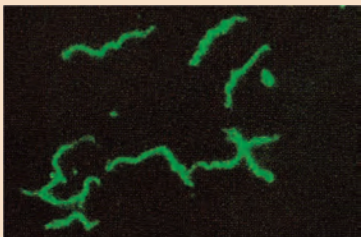
Tabela 3.2 Resumo dos vários tipos de microscópio			
Tipo de microscópio	Características	Imagem característica	Principais usos
Óptico Campo claro	Utiliza luz visível como fonte de iluminação; não pode determinar estruturas menores que 0,2 µm; a amostra aparece contra um fundo claro. Barato e fácil de usar.	 <i>Paramecium</i> MO 25 µm	Observar várias amostras coradas e contar micróbios; não determina amostras muito pequenas, como os vírus.
Campo escuro	Utiliza um condensador especial com um disco opaco que bloqueia a entrada de luz diretamente na lente objetiva; a luz refletida pela amostra entra na lente objetiva, e a amostra aparece clara contra um fundo preto.	 <i>Paramecium</i> MO 25 µm	Examinar micro-organismos vivos que são invisíveis na microscopia de campo claro, que não se coram facilmente ou que são distorcidos pela coloração; frequentemente utilizado para detectar <i>Treponema pallidum</i> no diagnóstico da sífilis.
Contraste de fase	Utiliza um condensador especial contendo um diafragma anular (em forma de anel). O diafragma permite que a luz direta passe através do condensador, focalizando a luz na amostra e em uma placa de difração na lente objetiva. Os raios de luz diretos e refletidos ou difratados são reunidos para produzir a imagem. Não é necessária coloração.	 <i>Paramecium</i> MO 25 µm	Facilitar o exame detalhado das estruturas internas das amostras vivas.
Contraste com interferência diferencial (CID)	Assim como o contraste de fase, utiliza as diferenças nos índices de refração para produzir imagens. Utiliza dois feixes de luz separados por prismas; a amostra aparece colorida como resultado do efeito do prisma. Não é necessária coloração.	 <i>Paramecium</i> MO 25 µm	Fornecer imagens tridimensionais.
Fluorescência	Utiliza uma fonte de luz ultravioleta ou quase ultravioleta que leva à emissão de luz de compostos fluorescentes (de cor verde) em uma amostra.	 <i>Treponema pallidum</i> MO 5 µm	Para técnicas de fluorescência com anticorpos (imunofluorescência), para detectar e identificar rapidamente os micróbios em tecidos ou amostras clínicas.

Tabela 3.2 Resumo dos vários tipos de microscópio

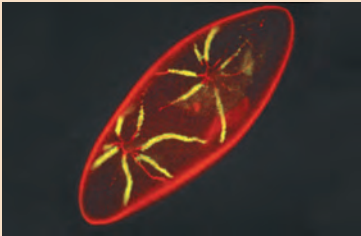
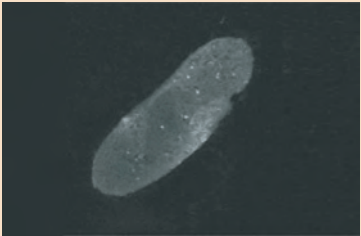
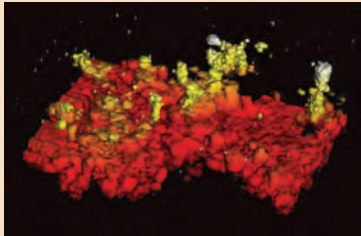
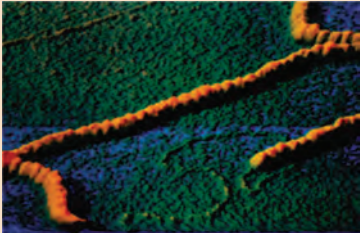
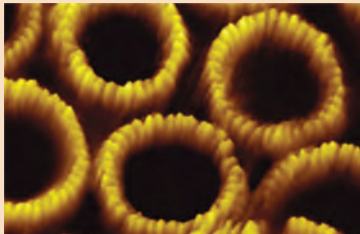
Tipo de microscópio	Características	Imagem característica	Principais usos
Confocal	Utiliza um único fóton para iluminar um plano da amostra de cada vez.	 <i>Paramecium</i> CF 22 μm	Obter imagens bi e tridimensionais das células para aplicações biomédicas.
Dois fótons	Utiliza dois fótons para iluminar a amostra.	 <i>Paramecium</i> MDF 20 μm	Formar imagens de células vivas, de até 1 mm de espessura, reduzir a fototoxicidade e observar a atividade celular em tempo real.
Acústica de varredura	Utiliza uma onda sonora de frequência específica que atravessa a amostra, com uma parte sendo refletida quando ela atinge uma interface dentro do material.	 <i>Biofilme</i> MAV 300 μm	Examinar células vivas aderidas a outra superfície, como células cancerígenas, placas ateroscleróticas e biofilmes.
Eletrônico Transmissão	Utiliza um feixe de elétrons ao invés de luz; os elétrons passam através da amostra; devido ao comprimento de onda mais curto dos elétrons, estruturas menores que 0,2 μm podem ser determinadas. A imagem produzida é bidimensional.	 <i>Paramecium</i> MET 25 μm	Examinar vírus ou a ultraestrutura interna em cortes delgados de células (normalmente ampliadas em 10.000 a 100.000x).
Varredura	Utiliza um feixe de elétrons ao invés de luz; os elétrons são refletidos a partir do espécime; devido ao comprimento de onda mais curto dos elétrons, estruturas menores que 0,2 μm podem ser determinadas. A imagem produzida é tridimensional.	 <i>Paramecium</i> MEV 25 μm	Estudar as características de superfície das células e dos vírus (normalmente ampliados em 1.000 a 10.000x).

Tabela 3.2 Resumo dos vários tipos de microscópio			
Tipo de microscópio	Características	Imagem característica	Principais usos
Varredura por sonda Tunelamento	Utiliza uma fina sonda de metal que varre a amostra e produz uma imagem que revela as protuberâncias e depressões dos átomos na superfície da amostra. A potência de resolução é muito maior que a de um microscópio eletrônico. Uma preparação especial não é necessária.	 Proteína RecA de <i>E. coli</i> MT 5 nm	Fornece imagens muito detalhadas das moléculas no interior das células.
Força atômica	Utiliza uma sonda de metal e diamante que é levemente pressionada ao longo da superfície da amostra, produzindo uma imagem tridimensional. Uma preparação especial não é necessária.	 Toxina perfringoliscina O de <i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> MFA 11 nm	Fornece imagens tridimensionais de moléculas biológicas em alta resolução, em detalhes a um nível quase atômico, e pode avaliar propriedades físicas de amostras biológicas e processos moleculares.

Preparação de amostras para microscopia óptica

OBJETIVOS DO APRENDIZADO

- 3-7 Diferenciar um corante ácido de um corante básico.
- 3-8 Explicar o propósito da coloração simples.
- 3-9 Listar as etapas na preparação de uma coloração de Gram, descrevendo a aparência das células gram-positivas e gram-negativas após cada etapa.
- 3-10 Comparar e contrastar a coloração de Gram e a coloração resistente a álcool-ácido.
- 3-11 Explicar por que cada uma das seguintes colorações é usada: coloração da cápsula, coloração do endosporo, coloração dos flagelos.

Como a maioria dos micro-organismos aparece quase incolor quando observada através de um microscópio óptico padrão, muitas vezes devemos prepará-los para a observação. Uma das formas pelas quais isso pode ser é através da coloração da amostra. A seguir, discutiremos vários procedimentos de coloração diferentes.

Preparando esfregaços para coloração

A maioria das observações iniciais dos micro-organismos é feita por meio de preparações coradas. **Coloração** significa simplesmente corar os micro-organismos com um corante que enfatize certas

estruturas. Porém, antes que os micro-organismos possam ser corados, devem ser **fixados** (aderidos) à lâmina do microscópio. A fixação simultaneamente mata os micro-organismos e os fixa na lâmina. Ela também preserva várias partes dos micróbios em seu estado natural com apenas um mínimo de distorção.

Quando uma amostra precisa ser fixada, um filme delgado de material contendo os micro-organismos é espalhado sobre a superfície da lâmina. Esse filme, denominado **esfregaço**, é deixado secar ao ar. Na maioria dos procedimentos de coloração, a lâmina é então fixada pela passagem, várias vezes, sobre a chama de um bico de Bunsen, com o lado do esfregaço para cima, ou recobrimdo a lâmina com álcool metílico por um minuto. A coloração é aplicada e então lavada com água; a seguir, a lâmina é seca com papel absorvente. Sem a fixação, a coloração poderia lavar os micróbios da lâmina. Os micro-organismos corados estão agora prontos para o exame microscópico.

Os corantes são sais compostos por um íon positivo e um íon negativo, um dos quais é colorido e conhecido como **cromóforo**. A cor dos assim chamados **corantes básicos** está no íon positivo; em **corantes ácidos**, está no íon negativo. As bactérias são levemente carregadas negativamente em pH 7. Desse modo, o íon positivo colorido em um corante básico é aderido à célula bacteriana carregada negativamente. Os corantes básicos, que incluem o cristal violeta, o azul de metileno, o verde de malaquita e a safranina, são mais comumente usados que os corantes ácidos. Os corantes ácidos não são

atraídos pela maioria dos tipos de bactérias porque os íons negativos do corante são repelidos pela superfície bacteriana carregada negativamente; assim, a coloração cora o fundo. A preparação de bactérias incolores contra um fundo corado é denominada **coloração negativa**. Ela é valiosa para a observação geral de formas da célula, tamanhos e cápsulas, pois as células tornam-se altamente visíveis contra um fundo escuro contrastante (veja a Figura 3.14a na página 72). As distorções do tamanho e da forma da célula são minimizadas porque a fixação não é necessária e as células não captam a coloração. Exemplos de corantes ácidos são a eosina, a fucsina ácida e a nigrosina.

Para aplicar corantes ácidos ou básicos, os microbiologistas utilizam três tipos de técnicas de coloração: simples, diferencial e especial.

Colorações simples

Uma **coloração simples** é uma solução aquosa ou alcoólica de um único corante básico. Embora diferentes corantes se liguem especificamente a diferentes partes das células, o objetivo primário de uma coloração simples é destacar todo o micro-organismo, para que as formas celulares e as estruturas básicas fiquem visíveis. A coloração é aplicada ao esfregaço fixo por certo período de tempo, e então lavada; a lâmina é seca e examinada. Algumas vezes, uma substância química é adicionada à solução para intensificar a coloração; este aditivo é denominado **mordente**. Uma função do mordente é aumentar a afinidade de uma coloração por uma amostra biológica; outra é revestir uma estrutura (como um flagelo) para torná-la mais espessa e mais fácil de ser vista após ser corada. Alguns dos corantes simples comumente usados em laboratório são o azul de metileno, a carbofucsina, o cristal violeta e a safranina.

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Por que um corante negativo não cora uma célula? **3-7**
- ✓ Por que a fixação é necessária na maioria dos procedimentos de coloração? **3-8**

Colorações diferenciais

Ao contrário das colorações simples, as **colorações diferenciais** reagem de modo distinto com diferentes tipos de bactérias, podendo assim ser usadas para diferenciá-las. As colorações diferenciais mais frequentemente utilizadas para bactérias são a coloração de Gram e a coloração álcool-ácido resistente.

Coloração de Gram

A **coloração de Gram** foi desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram. Ela é um dos procedimentos de coloração mais úteis, pois classifica as bactérias em dois grandes grupos: gram-positivas e gram-negativas.

Neste procedimento (**Figura 3.12a**),

- 1 Um esfregaço fixado pelo calor é recoberto com um corante básico púrpura, geralmente o cristal violeta. Uma vez que a coloração púrpura impregna todas as células, ela é denominada **coloração primária**.
- 2 Após um curto período de tempo, o corante púrpura é lavado, e o esfregaço é recoberto com iodo, um mordente. Quando o

iodo é lavado, ambas as bactérias gram-positivas e gram-negativas aparecem em cor violeta escuro ou púrpura.

- 3 A seguir, a lâmina é lavada com álcool ou uma solução de álcool-acetona. Essa solução é um **agente descolorante**, que remove o púrpura das células de algumas espécies, mas não de outras.
- 4 O álcool é lavado, e a lâmina é então corada com safranina, um corante básico vermelho. O esfregaço é lavado novamente, seco com papel e examinado microscopicamente.

O corante púrpura e o iodo se combinam no citoplasma de cada bactéria, corando-a de violeta escuro ou púrpura. As bactérias que retêm essa cor após a tentativa de descolori-las com álcool são classificadas como **gram-positivas**; as bactérias que perdem a cor violeta escuro ou púrpura após a descoloração são classificadas como **gram-negativas** (**Figura 3.12b**). Como as bactérias gram-negativas são incolores após a lavagem com álcool, elas não são mais visíveis. É por isso que o corante básico safranina é aplicado; ele cora a bactérias gram-negativas de rosa. Os corantes como a safranina, que possuem uma cor contrastante com a coloração primária, são denominados **contracorantes**. Como as bactérias gram-positivas retêm a cor púrpura original, não são afetadas pelo contracorante safranina.

Como você verá no Capítulo 4, os diferentes tipos de bactérias reagem de modo distinto à coloração de Gram, pois diferenças estruturais em suas paredes celulares afetam a retenção ou a liberação de uma combinação de cristal violeta e iodo, denominada complexo cristal violeta-iodo (CV-I). Entre outras diferenças, as bactérias gram-positivas possuem uma parede celular de peptidoglicano mais espessa (dissacarídeos e aminoácidos) que as bactérias gram-negativas. Além disso, as bactérias gram-negativas contêm uma camada de lipopolissacarídeo (lipídeos e polissacarídeos) como parte de sua parede celular (veja a Figura 4.13, página 86). Quando aplicados a células gram-positivas e gram-negativas, o cristal violeta e o iodo penetram facilmente nas células. Dentro das mesmas, o cristal violeta e o iodo se combinam para formar o CV-I. Esse complexo é maior que a molécula de cristal violeta que penetrou na célula e, devido a seu tamanho, não pode ser removido da camada intacta de peptidoglicano das células gram-positivas pelo álcool. Consequentemente, as células gram-positivas retêm a cor do corante cristal violeta. Nas células gram-negativas, contudo, a lavagem com álcool rompe a camada externa de lipopolissacarídeo, e o complexo CV-I é removido através da camada delgada de peptidoglicano. Como resultado, as células gram-negativas permanecem incolores até serem contracoradas com a safranina, quando adquirem a cor rosa.

Em resumo, as células gram-positivas retêm o corante e permanecem com a cor púrpura. As células gram-negativas não retêm o corante; elas ficam incolores até serem contracoradas com um corante vermelho.

O método de Gram é uma das mais importantes técnicas de coloração na microbiologia médica. Porém, os resultados da coloração de Gram não são universalmente aplicáveis, pois algumas células bacterianas coram-se fracamente ou não adquirem cor. A reação de Gram é mais consistente quando utilizada em bactérias jovens, em crescimento.

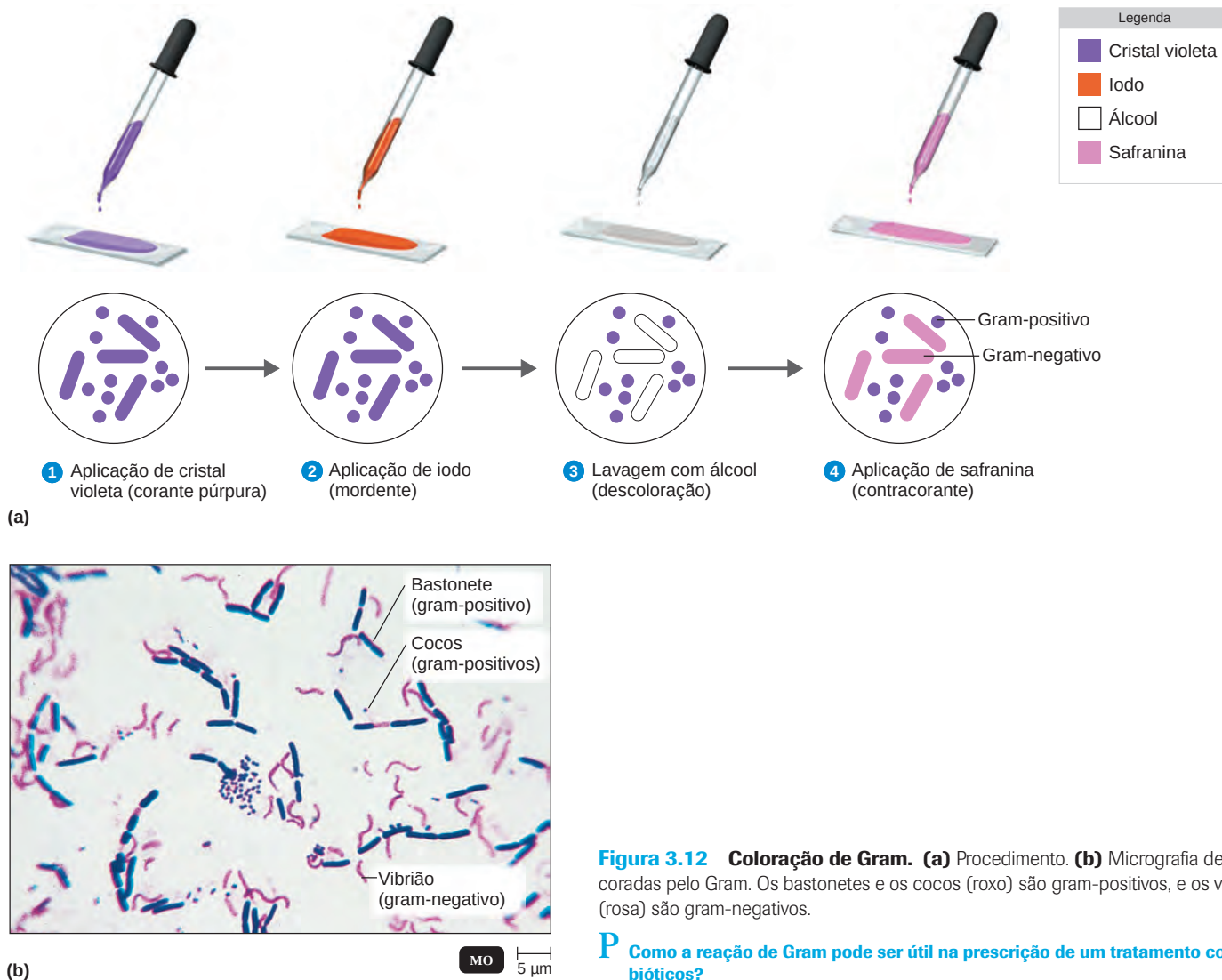


Figura 3.12 Coloração de Gram. (a) Procedimento. (b) Micrografia de bactérias coradas pelo Gram. Os bastonetes e os cocos (roxo) são gram-positivos, e os vibriões (rosa) são gram-negativos.

P Como a reação de Gram pode ser útil na prescrição de um tratamento com antibióticos?

A reação de Gram de uma bactéria pode fornecer informações valiosas para o tratamento da doença. As bactérias gram-positivas tendem a ser mortas mais facilmente por penicilinas e cefalosporinas. As bactérias gram-negativas geralmente são mais resistentes porque os antibióticos não podem penetrar a camada de lipopolissacarídeo. Parte da resistência a estes antibióticos entre ambas as bactérias gram-positivas e gram-negativas é devida à inativação bacteriana dos antibióticos.

Coloração álcool-ácido resistente

Outra importante coloração diferencial (que classifica as bactérias em grupos distintos) é a **coloração álcool-ácido resistente**, que se liga fortemente apenas a bactérias que possuem material céreo em suas paredes celulares. Os microbiologistas utilizam essa coloração para identificar todas as bactérias do gênero *Mycobacterium*, in-

cluindo os dois importantes patógenos *Mycobacterium tuberculosis*, o agente causador da tuberculose, e *Mycobacterium leprae*, o agente causador da lepra. Essa coloração também é usada para identificar as linhagens patogênicas do gênero *Nocardia*. As bactérias dos gêneros *Mycobacterium* e *Nocardia* são álcool-ácido resistentes.

P&R No procedimento de coloração álcool-ácido resistente, o corante vermelho carbolfucsina é aplicado a um esfregaço fixado, e a lâmina é aquecida levemente por vários minutos. (O calor aumenta a penetração e a retenção do corante.) A seguir, a lâmina é resfriada e lavada com água. O esfregaço é tratado com álcool-ácido, um descolorante, que remove o corante vermelho das bactérias que não são álcool-ácido resistentes. Os micro-organismos álcool-ácido resistentes retêm a cor vermelha, pois a carbolfucsina é mais solúvel nos lipídeos da parede celular que no álcool-ácido (**Figura 3.13**). Em bactérias que não são álcool-ácido

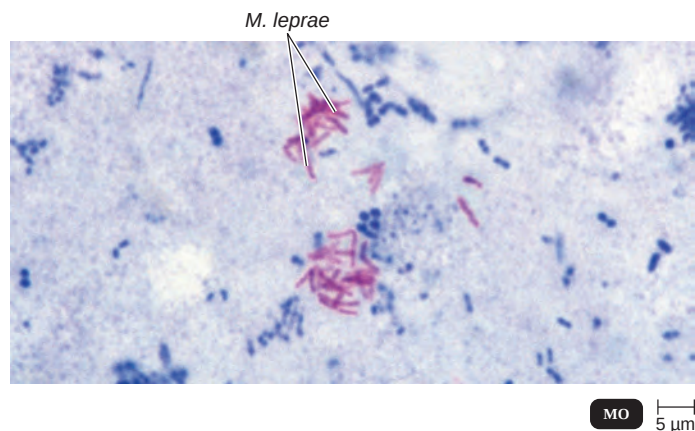


Figura 3.13 Bactérias álcool-ácido resistentes (BAAR). As bactérias *Mycobacterium leprae* que infectaram este tecido foram coradas de vermelho com uma coloração álcool-ácido. As células que não são álcool-ácido resistentes estão coradas com o contracorante azul de metileno.

P Nomeie duas doenças que podem ser diagnosticadas utilizando-se a coloração álcool-ácido resistente.

resistentes, cujas paredes celulares não possuem os componentes lipídicos, a carbolfucsina é rapidamente removida durante a descoloração, deixando as células incolores. O esfregaço é então corado com o contracorante azul de metileno. As células que não são álcool-ácido resistentes ficam azuis após a aplicação do contracorante.

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ Por que a coloração de Gram é tão útil? **3-9**
- ✓ Qual coloração poderia ser utilizada para identificar micróbios dos gêneros *Mycobacterium* e *Nocardia*? **3-10**

Colorações especiais

As **colorações especiais** são usadas para corar e isolar partes específicas dos micro-organismos, como os endosporos e os flagelos, e para revelar a presença de cápsulas.

Coloração negativa para cápsulas

Muitos micro-organismos contêm um revestimento gelatinoso denominado **cápsula**, que discutiremos em nosso exame da célula procariótica, no Capítulo 4. Na microbiologia médica, a demonstração da presença de uma cápsula é um modo de determinar a **virulência** do organismo, o grau em que um patógeno pode causar doença.

A coloração da cápsula é mais difícil que outros tipos de procedimentos de coloração, pois os materiais capsulares são solúveis em água e podem ser desalojados ou removidos durante uma lavagem rigorosa. Para demonstrar a presença de cápsulas, um mi-

crobiologista pode misturar as bactérias em uma solução contendo uma fina suspensão coloidal de partículas coradas (geralmente com tinta nanquim ou nigrosina), para fornecer um fundo contrastante e então corar as bactérias com uma coloração simples, como a safranina (**Figura 3.14a**). Devido à sua composição química, as cápsulas não reagem com a maioria dos corantes, como a safranina, e desse modo aparecem como halos circundando cada célula bacteriana.

Coloração para endosporos (esporos)

Um **endosporo** é uma estrutura especial resistente, dormente, formada dentro de uma célula que protege uma bactéria das condições ambientais adversas. Embora os endosporos sejam relativamente incomuns nas células bacterianas, podem ser formados por alguns gêneros de bactérias. Os endosporos não podem ser corados pelos métodos comuns, como a coloração simples e a coloração de Gram, pois os corantes não penetram a parede do endosporo.

A coloração mais comumente usada para endosporos é a **técnica de Schaeffer-Fulton** (**Figura 3.14b**). O verde malaquita, a coloração primária, é aplicado a um esfregaço fixado com calor e aquecido em vapor por cerca de cinco minutos. O calor auxilia a coloração a penetrar na parede do endosporo. Então, a preparação é lavada por cerca de 30 segundos com água, para remover o verde malaquita de todas as partes da célula, exceto dos endosporos. A seguir, a safranina, um contracorante, é aplicada ao esfregaço para corar as porções da célula que não os endosporos. Em um esfregaço corretamente preparado, os endosporos aparecem em verde dentro de células vermelhas ou rosadas. Como os endosporos são altamente refrativos, podem ser detectados no microscópio óptico quando não corados, mas não podem ser diferenciados de inclusões de material armazenado sem uma coloração especial.

Coloração dos flagelos

Os **flagelos** bacterianos são estruturas de locomoção muito pequenas para serem visualizadas com um microscópio óptico sem coloração. Um procedimento tedioso e delicado de coloração utiliza um mordente e o corante carbolfucsina para aumentar os diâmetros dos flagelos até que eles se tornem visíveis no microscópio óptico (**Figura 3.14c**). Os microbiologistas utilizam o número e o arranjo dos flagelos como auxiliares de diagnóstico.

TESTE SEU CONHECIMENTO

- ✓ De que maneira os endosporos não corados aparecem? E os endosporos corados? **3-11**

Um resumo das colorações é apresentado na **Tabela 3.3**. Nos próximos capítulos, examinaremos melhor as estruturas dos micróbios e como eles se protegem, nutrem e reproduzem.



Tabela 3.3 Resumo de várias colorações e seus usos	
Coloração	Principais usos
Simples (azul de metileno, carbofucsina, cristal violeta, safranina)	Utilizada para destacar os micro-organismos e para determinar as formas e os arranjos celulares. Uma solução aquosa ou alcoólica de um único corante básico cora as células. (Algumas vezes, um mordente é adicionado para intensificar a coloração.)
Diferencial Gram	Utilizada para distinguir diferentes tipos de bactérias. Classifica as bactérias em dois grandes grupos: gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta e adquirem a cor púrpura. As bactérias gram-negativas não retêm o cristal violeta e permanecem incolores, até serem contracoradas com safranina, quando adquirem a cor rosa.
Álcool-ácido resistente	Utilizada para distinguir espécies de <i>Mycobacterium</i> e algumas espécies de <i>Nocardia</i> . As bactérias álcool-ácido resistentes, uma vez coradas com carbofucsina e tratadas com álcool-ácido, permanecem vermelhas, pois retêm o corante carbofucsina. As bactérias álcool-ácido sensíveis, quando coradas e tratadas da mesma forma e a seguir coradas com azul de metileno, adquirem a cor azul, pois perdem a carbofucsina e são então capazes de aceitar o corante azul de metileno.
Especial	Utilizada para corar e isolar várias estruturas, como cápsulas, endosporos e flagelos; algumas vezes usada como auxiliar de diagnósticos.
Negativa	Utilizada para demonstrar a presença de cápsulas. Uma vez que as cápsulas não reagem com a maioria dos corantes, apresentam-se como halos incolores em torno das células bacterianas, destacando-se contra um fundo escuro.
Endosporos	Utilizada para detectar a presença de endosporos nas bactérias. Quando o verde malaquita é aplicado a um esfregaço de células bacterianas fixado pelo calor, o corante penetra nos endosporos e os cora de verde. Quando a safranina (vermelha) é adicionada, cora o restante da célula de vermelho ou rosa.
Flagelos	Utilizada para demonstrar a presença de flagelos. Um mordente é usado para aumentar os diâmetros dos flagelos até que se tornem visíveis microscopicamente quando corados com carbofucsina.

RESUMO PARA ESTUDO

Unidades de medida (p. 55)

1. A unidade-padrão de comprimento é o metro (m).
2. Os micro-organismos são medidos em micrômetros, μm (10^{-6}m), e nanômetros, nm (10^{-9}m).

Microscopia: os instrumentos (p. 55-68)

1. Um microscópio simples possui uma lente; um microscópio composto possui múltiplas lentes.

Microscopia óptica (p. 56, 58-62)

Microscopia óptica composta (p. 56, 58, 59)

2. O microscópio mais comum usado em análises microbiológicas é o microscópio óptico composto (MO).
3. A ampliação total de um objeto é calculada multiplicando-se a ampliação da lente objetiva pela ampliação da lente ocular.
4. O microscópio óptico composto utiliza luz visível.
5. A resolução máxima, ou potência de resolução (a capacidade de distinguir entre dois pontos), de um microscópio óptico composto é de $0,2\mu\text{m}$; a ampliação máxima é de $2.000\times$.
6. As amostras são coradas para aumentar a diferença entre os índices de refração da amostra e do meio.
7. O óleo de imersão é utilizado com lentes de imersão para reduzir a perda de luz entre a lâmina e a lente.
8. A iluminação em campo claro é utilizada para esfregaços corados.
9. As células não coradas são observadas de modo mais eficiente utilizando-se a microscopia de campo escuro, contraste de fase ou CID.



Microscopia de campo escuro (p. 59)

10. O microscópio de campo escuro mostra uma silhueta de luz de um organismo contra um fundo escuro.
11. Esse tipo de microscopia é mais útil para detectar a presença de organismos extremamente pequenos.

Microscopia de contraste de fase (p. 59, 60)

12. Um microscópio de contraste de fase agrupa os raios de luz diretos e refletidos ou difratados (em fase) para formar uma imagem da amostra na lente ocular.
13. Este tipo de microscopia permite a observação detalhada de organismos vivos.

Microscopia de contraste com interferência diferencial (CID) (p. 60)

14. O microscópio CID fornece uma imagem tridimensional colorida do objeto sendo observado.
15. Este tipo de microscopia permite uma observação detalhada dos organismos vivos.

Microscopia de fluorescência (p. 61, 62)

16. Na microscopia de fluorescência, as amostras são primeiramente marcadas com fluorocromos e então visualizadas através de um microscópio composto utilizando-se uma fonte de luz ultravioleta.
17. Os micro-organismos aparecem como objetos luminosos contra um fundo escuro.

18. A microscopia de fluorescência é usada principalmente em um procedimento diagnóstico denominado técnica de anticorpo fluorescente (FA) ou imunofluorescência.

Microscopia confocal (p. 62)

19. Na microscopia confocal, uma amostra é corada com um corante fluorescente, sendo então excitada com raios de luz de baixo comprimento de onda.
20. Utilizando um computador para o processamento das imagens, podem-se obter imagens bi ou tridimensionais das células.

Microscopia de dois fótons (p. 62)

21. Na microscopia de dois fótons, uma amostra viva é corada com um corante fluorescente e excitada com raios de luz de comprimento de onda longo.

Microscopia acústica de varredura (p. 63)

22. A microscopia acústica de varredura (MAV) tem como base a interpretação de ondas sonoras através de uma amostra.
23. Este tipo de microscopia é utilizado para estudar células vivas aderidas a superfícies, tais como células cancerígenas, placas ateroscleróticas e biofilmes.

Microscopia eletrônica (p. 63-65)

24. Em vez de luz, um feixe de elétrons é utilizado em um microscópio eletrônico.
25. Em vez de lentes de vidro, eletromagnetos controlam o foco, a iluminação e a ampliação.
26. Cortes delgados de organismos podem ser observados em uma micrografia eletrônica produzida utilizando-se um microscópio eletrônico de transmissão (MET). Ampliação: 10.000 a $100.000\times$. Potência de resolução: $2,5\text{nm}$.
27. Imagens tridimensionais das superfícies de um micro-organismo podem ser obtidas com um microscópio eletrônico de varredura (MEV). Ampliação: 1.000 a $10.000\times$. Potência de resolução: 20nm .



Microscopia de varredura por sonda (p. 65)

28. A microscopia de tunelamento (MT) e microscopia de força atômica (MFA) produzem imagens tridimensionais da superfície de uma molécula.

Preparação de amostras para microscopia óptica (p. 68-72)

Preparando esfregaços para coloração (p. 68, 69)

1. Realizar uma coloração significa corar um micro-organismo com um corante para tornar algumas de suas estruturas mais visíveis.
2. A fixação utiliza calor ou álcool para matar e aderir os micro-organismos a uma lâmina.
3. Um esfregaço é um filme delgado de material utilizado para o exame microscópico.

- 4. As bactérias são carregadas negativamente, e o íon positivo colorido de um corante básico irá corar as células bacterianas.
- 5. O íon negativo colorido de um corante ácido irá corar o fundo de um esfregaço bacteriano; uma coloração negativa é produzida.

Coloração simples (p. 69)

- 6. Uma coloração simples é uma solução aquosa ou alcoólica de um único corante básico.
- 7. Este tipo de coloração é utilizado para tornar as formas e os arranjos celulares mais visíveis.
- 8. Um mordente pode ser usado para aumentar a ligação entre o corante e a amostra.

Colorações diferenciais (p. 69-71)

- 9. As colorações diferenciais, como a coloração de Gram e a coloração álcool-ácido resistente, diferenciam as bactérias de acordo com suas reações aos corantes.

- 10. A coloração de Gram utiliza um corante púrpura (cristal violeta), iodo como mordente, álcool como descolorante e um contracorante vermelho.
- 11. As bactérias gram-positivas retêm o corante púrpura após a etapa de descoloração; as bactérias gram-negativas não retêm o corante púrpura e ficam rosadas após o uso do contracorante.
- 12. Os micróbios álcool-ácido resistentes, como os membros do gênero *Mycobacterium* e *Nocardia*, retêm a carbolfucsina após a etapa de descoloração com álcool-ácido e aparecem vermelhos; os micróbios álcool-ácido sensíveis captam o contracorante azul de metileno e aparecem azuis.

Colorações especiais (p. 71, 72)


- 13. A coloração negativa é utilizada para tornar visíveis as cápsulas microbianas.
- 14. As colorações para endosporos e flagelos são colorações especiais que coram somente certas partes das bactérias.

QUESTÕES PARA ESTUDO

As respostas para as questões de revisão e múltipla escolha podem ser encontradas na seção *Respostas* deste livro.

Revisão

- 1. Preencha as seguintes lacunas:
 - a. $1 \mu\text{m} = \text{m}$
 - b. $1 = 10^{-9} \text{m}$
 - c. $1 \mu\text{m} = \text{nm}$
- 2. Que tipo de microscópio seria o melhor para se observar cada um dos seguintes itens?
 - a. Um esfregaço corado de bactérias.
 - b. Células bacterianas não coradas quando as células são pequenas e não há necessidade de detalhes.
 - c. Tecido vivo não corado quando se deseja observar mais detalhes intracelulares.
 - d. Uma amostra que emite luz quando excitada com luz ultravioleta.
 - e. Detalhe intracelular de uma célula que possui $1 \mu\text{m}$ de comprimento.
 - f. Células vivas não coradas em que as estruturas intracelulares são mostradas em cores.
- 3. **DESENHE** Identifique as partes de um microscópio óptico composto na figura abaixo e então desenhe a trajetória percorrida pela luz a partir do iluminador até o seu olho.

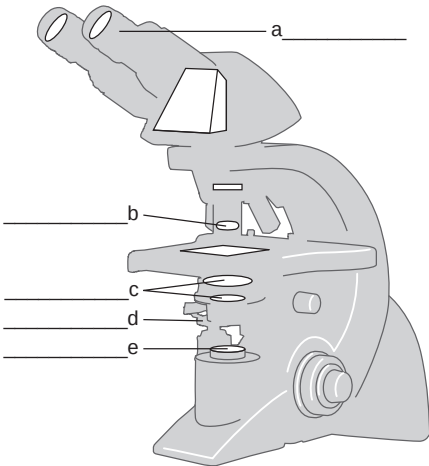

- 4. Calcule a ampliação total do núcleo de uma célula sendo observada através de um microscópio óptico composto com uma lente ocular de 10 $\times$ e uma lente de imersão em óleo.
- 5. A ampliação máxima de um microscópio óptico composto é (a) _____, enquanto a de um microscópio eletrônico é (b) _____. A resolução máxima de um microscópio composto é (c) _____, enquanto a de um microscópio eletrônico é (d) _____. Uma vantagem da microscopia eletrônica de varredura em relação à microscopia eletrônica de transmissão é (e) _____.
- 6. Por que o mordente é utilizado na coloração de Gram e na coloração de flagelos?
- 7. Qual o propósito do uso de um contracorante na coloração álcool-ácido resistente?
- 8. Qual o objetivo do uso de um descolorante na coloração de Gram? E na coloração álcool-ácido resistente?
- 9. Preencha a seguinte tabela sobre a coloração de Gram:

Etapas	Aparência após esta etapa	
	Células gram-positivas	Células gram-negativas
Cristal violeta	a. _____	e. _____
Iodo	b. _____	f. _____
Álcool-acetona	c. _____	g. _____
Safranina	d. _____	h. _____

Múltipla escolha

- 1. Suponha que você corou uma amostra de *Bacillus* aplicando uma solução de verde malaquita aquecida e então contracorou com safranina. Olhando no microscópio, as estruturas verdes são:
 - a. Paredes celulares.
 - b. Cápsulas.
 - c. Endosporos.
 - d. Flagelos.
 - e. Impossível de identificar.
- 2. Imagens tridimensionais de células vivas podem ser obtidas com:
 - a. Microscopia de campo escuro.
 - b. Microscopia de fluorescência.
 - c. Microscopia eletrônica de varredura.
 - d. Microscopia de dois fótons.
 - e. Todas as alternativas.


3. A carbolfucsina pode ser usada como um corante simples e como um corante negativo. Como corante simples, o pH deve ser:
 - a. 2.
 - b. Maior que o corante negativo.
 - c. Menor que o corante negativo.
 - d. O mesmo usado na coloração negativa.
4. Examinando a célula de um micro-organismo fotossintetizante, você observa que os cloroplastos são verdes na microscopia de campo claro e vermelhos na microscopia de fluorescência. Você conclui que:
 - a. A clorofila é fluorescente.
 - b. A ampliação distorceu a imagem.
 - c. Você não visualizou a mesma estrutura em ambos os microscópios.
 - d. A coloração mascarou a cor verde.
 - e. Nenhuma das alternativas.
5. Qual das seguintes opções *não* corresponde a um par funcionalmente análogo de corantes?
 - a. Nigrosina e verde malaquita.
 - b. Cristal violeta e carbolfucsina.
 - c. Safranina e azul de metileno.
 - d. Etanol-acetona e álcool-ácido.
 - e. Nenhuma das alternativas.
6. Qual dos seguintes pares não está correto?
 - a. Cápsula – coloração negativa.
 - b. Arranjo celular – coloração simples.
 - c. Tamanho das células – coloração negativa.
 - d. Coloração de Gram – identificação bacteriana.
 - e. Nenhuma das alternativas.
7. Imagine que você corou uma amostra de *Clostridium* com a aplicação do corante básico carbolfucsina aquecido. A descoloração se dá com álcool-ácido e a contracoloração com um corante ácido conhecido como nigrosina. Pelo microscópio, os endosporos são 1 e as células são 2.
 - a. 1 – vermelho; 2 – preto.
 - b. 1 – preto; 2 – incolor.
 - c. 1 – incolor; 2 – preto.
 - d. 1 – vermelho; 2 – incolor.
 - e. 1 – preto; 2 – vermelho.
8. Imagine que você está observando um campo microscópico de uma amostra corada pelo método de Gram, com cocos vermelhos e bacilos azuis. Você pode concluir com segurança que:
 - a. Cometeu um engano durante o procedimento de coloração.
 - b. Está observando duas espécies diferentes.
 - c. As células bacterianas estão velhas.
 - d. As células bacterianas são jovens.
 - e. Nenhuma das alternativas.
9. Em 1996, os cientistas descreveram uma nova ténia que havia matado pelo menos uma pessoa. O exame inicial da massa abdominal do paciente mais provavelmente foi realizado utilizando-se:
 - a. Microscopia de campo claro.
 - b. Microscopia de campo escuro.
 - c. Microscopia eletrônica.
 - d. Microscopia de contraste de fase.
 - e. Microscopia de fluorescência.
10. Qual das seguintes alternativas *não* corresponde a uma modificação do microscópio óptico composto?
 - a. Microscópio de campo claro.
 - b. Microscópio de campo escuro.
 - c. Microscópio eletrônico.
 - d. Microscópio de contraste de fase.
 - e. Microscópio de fluorescência.

Pensamento crítico

1. Durante uma coloração de Gram, uma etapa pode ser omitida e ainda assim permitir a diferenciação entre células gram-positivas e gram-negativas. Que etapa é essa?
2. Utilizando um bom microscópio composto com uma potência de resolução de 0,3 μm , uma lente ocular com um aumento de 10 $\times$, e uma lente objetiva de imersão em óleo com aumento de 100 $\times$, você seria capaz de discernir dois objetos separados por 3 μm , por 0,3 μm e por 300 nm?
3. Por que a coloração de Gram não é recomendada para uso em bactérias álcool-ácido resistentes? Se você realizasse uma coloração de Gram em bactérias álcool-ácido resistentes, qual seria sua reação de Gram? Qual a reação de Gram para bactérias álcool-ácido sensíveis?
4. Os endosporos podem ser vistos como estruturas com refração em meio a células não coradas e como áreas incolores em meio a células coradas pelo método de Gram. Por que é necessária uma coloração para verificar a presença de endosporos?

Aplicações clínicas

1. Em 1882, o bacteriologista alemão Paul Ehrlich descreveu um método para corar *Mycobacterium* e observou: “Pode ser que todos os agentes desinfetantes que são ácidos não exerçam nenhum efeito sobre este bacilo (da tuberculose), e teremos de nos limitar aos agentes alcalinos”. Como ele chegou a esta conclusão sem testar os desinfetantes?
2. O diagnóstico laboratorial da infecção por *Neisseria gonorrhoeae* tem como base o exame microscópico de pus corado pelo método de Gram. Identifique a bactéria nesta micrografia óptica. Qual é a doença?

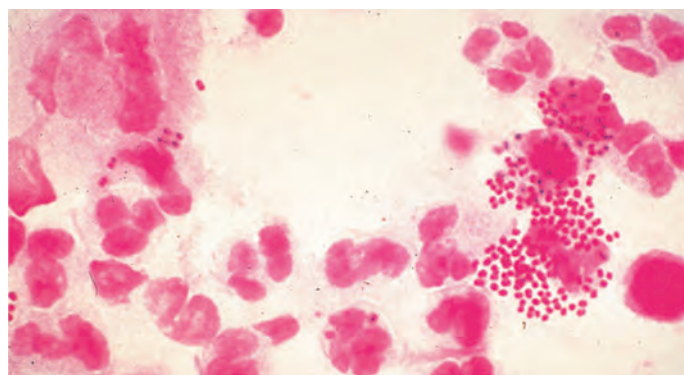

MO 5 μm

3. Imagine que você está observando uma amostra de secreção vaginal corada pelo método de Gram. Grandes células vermelhas nucleadas (10 μm) estão recobertas com pequenas células azuis em suas superfícies (0,5 μm X 1,5 μm). Qual a explicação mais provável para a ocorrência de células vermelhas e azuis?
4. Uma amostra de expectoração de Calle, um elefante asiático de 30 anos de idade, foi colocada sobre uma lâmina e exposta ao ar para secar. O esfregaço foi fixado, coberto com carbolfucsina e aquecido por cinco minutos. Após uma lavagem com água, foi adicionado álcool-ácido ao esfregaço por 30 segundos. Finalmente, o esfregaço foi corado com azul de metileno por 30 segundos, lavado com água e secado. Durante o exame sob aumento de 1.000 $\times$, o veterinário do zoológico observou bacilos vermelhos sobre a lâmina. Que infecções são sugeridas pelos resultados? (Calle foi tratado e se recuperou.)